



systemMED
GROUPE EVRARD

Catalogue

Tables d'opération et de consultation
gynéco/urologie - 2025



Votre interlocuteur unique pour des solutions clés en main

Deux divisions commerciales

Division Équipement

Équipements et solutions pour le confort et la performance



Division Bloc opératoire

Conception-réalisation de salles d'opération intégrées



Service commercial
04 78 89 71 43
info@system-med.fr

Deux divisions techniques

Division Service

Une hot line, des spécialistes et des techniciens itinérants pour la réalisation des visites techniques, des chantiers, les mises en services et la maintenance.



Service technique
03.83.22.20.68
sav@system-med.fr

Division Ingénierie


Six ingénieurs et deux informaticiens équipés de station CAO Autocad et BIM Revit pour les études techniques, la réalisation de plans d'implantation et le management de projets.



Service Ingénierie :
04 37 42 22 81
bet@system-med.fr

Une forte présence nationale

Une présence nationale qui vous assure un service professionnel, rapide, performant, compétent et personnalisé. Nos équipes sont à votre disposition pour tous vos projets.

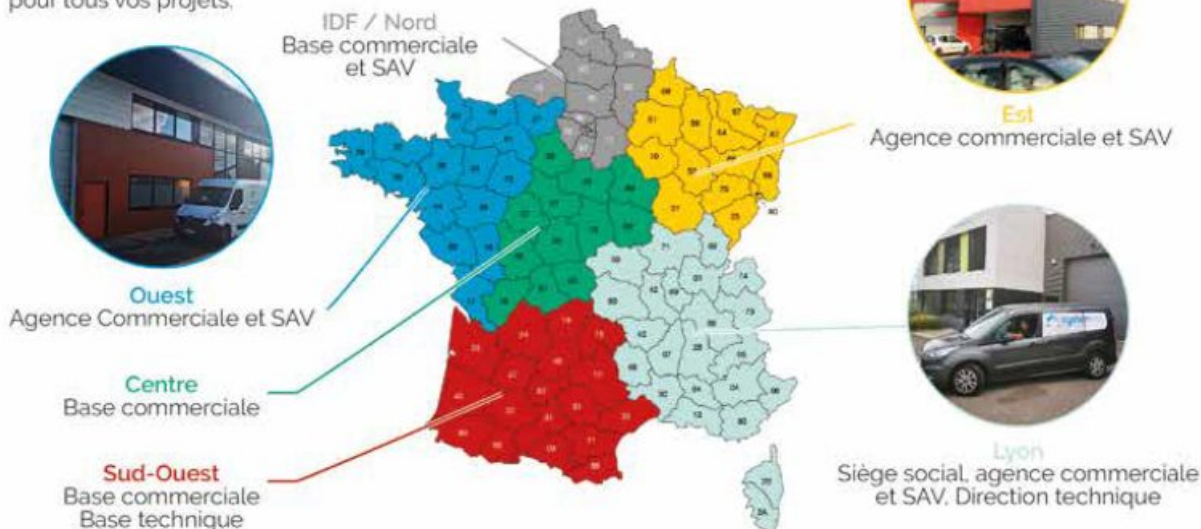

Station de consultation gynécologique 3D Table Medifa 4000 avec colposcope Imed Wild 3D




Ce poste de travail complet permet d'économiser de l'espace et d'avoir à portée de main, sans gêne au sol, un vidéocolposcope 3D, avec son écran d'affichage et sa tablette tactile

La table de consultation Medifa 4000 peut être équipée d'un vidéocolposcope Imed 3D avec station d'affichage et d'enregistrement embarquée

La tablette tactile est munie d'un logiciel intuitif très simple permettant : – création patient (remontée de la worlist)

- archivage des patients, plusieurs procédures par patients
- photo/vidéo (photos 4K)
- marquage des photos (zone biopsiée,...)
- insertion de commentaires (bibliothèque des termes de colposcopie en liste déroulante)
- enregistrement sur le disque dur local, sur clé USB ou sur le réseau directement (interfaces pour le PACS)

Table d'imagerie mobile à plateau carbone flottant pour salles hybrides Medifa 8000 HYBRID – translation électrique et manuelle

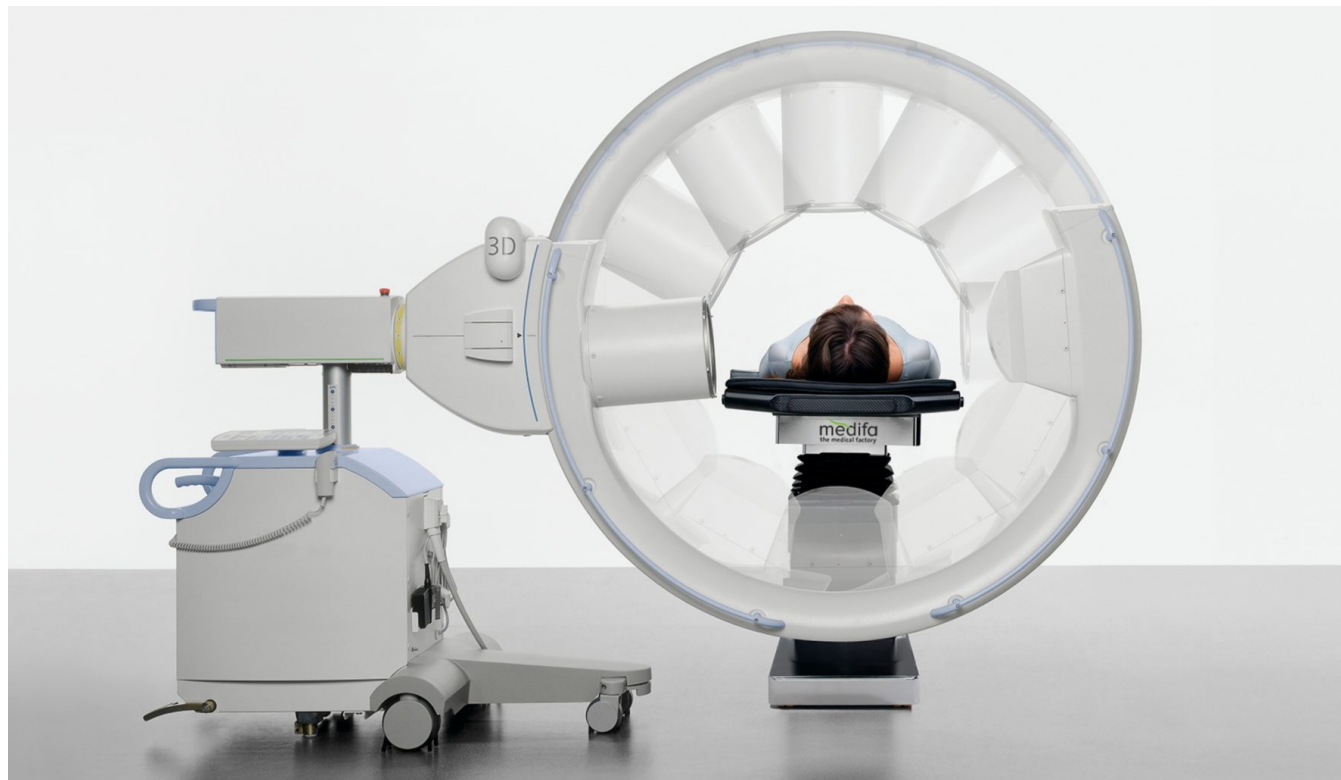

La nouvelle table à plateau carbone Medifa 8000 HYBRID : une table mobile à plateau carbone flottant manuel et électrique, pour transformer n'importe quelle salle d'opération en salle hybride.

Flexibilité et efficience

- Pratiquement chaque salle d'opération peut être utilisée comme salle d'opération multidisciplinaire
- Les faibles coûts d'acquisition, d'entretien et de maintenance augmentent le retour sur investissement

Sécurité et ergonomie

- Image de haute qualité et peu d'artefacts pendant la radioscopie grâce au plateau de table en carbone radiotransparent avec rails normalisés en carbone intégrés
- Sécurité des patients et des utilisateurs élevée grâce à la faible dose de rayonnement nécessaire

Plateau carbone flottant : mouvements libres dans toutes les directions

- Meilleur contrôle du déroulement de l'opération grâce à l'utilisation libre par l'opérateur (vitesse et direction)
- Imagerie de qualité optimale avec une dose rayonnement inférieure

Table d'opération mobile à déplacement motorisé Medifa 7000



Table d'opération Medifa 7000 : la toute dernière génération de table polyvalente à déplacement motorisé

- motorisation avec régulation de vitesse et poignée de conduite
- télécommande sans fil ergonomique et évolutive
- châssis inox avec accès pour les pieds du chirurgien
- large gamme d'accessoires
- Conception pour patients pesant jusqu'à 544 kg
- Peu de maintenance grâce à la nouvelle génération de moteurs électromécaniques (pas d'hydraulique)
- Prévention optimale des escarres grâce à des matelas de 80 mm à mémoire de forme
- Cadrage énorme pour l'utilisation optimale d'un amplificateur de brillance
- Translation longitudinale du plateau jusqu'à 400 mm
- Hauteur basse pour un travail confortable du chirurgien en position assise et pour procédures endoscopiques
- Réglage de sécurité optionnel pour les fonctions basiques en cas d'une panne électrique
- Poignées pour conduire la table en utilisant la 5ième roue motorisée, incluant régulation de la vitesse intégrée
- Vérins stabilisateur intégrés aux roues assurant une stabilisation forte de la table

Table d'opération mobile à déplacement non motorisé Medifa 6000



Table d'opération Medifa 6000 : une table polyvalente et performante pour un coût maîtrisé

- capacité de charge jusqu'à 454 kg – 10 fonctionnalités électriques
- grandes plages de réglage
- Modèle haute qualité en acier inoxydable poli
- Possibilités optimales de nettoyage et de désinfection
- Simplicité de fonctionnement et d'entretien
- Batteries et chargeur intégrés
- Télécommande avec écran couleur
- Commande manuelle additionnelle offrant un réglage des fonctions électro-hydrauliques à tout moment
- Excellente maniabilité grâce à la 5ème roue centrale
- Idéale pour les applications d'imagerie et pour l'utilisation d'amplificateur de brillance
- Vaste gamme d'accessoires pour toutes les spécialités
- Différents matelas et configurations
- Vérins stabilisateur offrant une stabilité optimale de la table en option

Table d'opération mobile ambulatoire Medifa 5000



- deux châssis pour applications hautes ou basses
- deux types de plateaux
- versions manuelles, hydrauliques ou électrohydrauliques
- override manuel de toutes les fonctions
- large gamme d'accessoires
- Rapport prix/performance unique
- Simplicité de fonctionnement et d'entretien
- Capacité de charge jusqu'à 250 kg
- Trois positions mémorisables
- Batteries et chargeur intégrés
- Télécommande avec écran couleur

Table de consultation gynéco Medifa 4000 – Gynécologie



La table de consultation gynécologique Medifa 4000 est la référence de fabrication allemande pour la consultation gynéco. Avec un châssis et une colonne entièrement en aluminium laqué, un cadre entièrement en acier inoxydable massif, et des revêtements sans coutures ni agraffes, c'est un produit qui vous satisfera pendant de très longues années.

Medifa 4000 : une table de consultation gynécologique universelle, performante, robuste, économique et confortable

- fabrication allemande
- 3 ou 4 moteurs, 12 mémoires
- motorisation indépendante des supports de pieds
- châssis durable entièrement aluminium/inox
- allongement facile avec tablette intégrée

La construction autoporteuse sans pièces plastiques rapportées assure une durabilité exceptionnelle. Le fonctionnement synchrone et très rapide des 3 ou 4 moteurs, allié à une sélection de 12 mémoires par commande manuelle ou au pied, vous permet un gain de temps au quotidien. Les repose-jambes ergonomiques ainsi que le plateau escamotable pour l'allongement assurent un positionnement confortable de la patiente, dans une position idéale pour le médecin.

Table de consultation urologique Medifa 4000 – Urologie



La table Medifa 4000 en version urologique propose une large gamme d'accessoires pour les consultations urologiques, endo-urologiques, et urodynamiques. La position allongée est facile et confortable, l'accès aux patients handicapés ou neurologiques est aisée grâce aux supports de pieds motorisés indépendamment.

La table d'urologie Medifa 4000 – uro : un condensé de fonctionnalités

- examen urologique
- examen urodynamique
- endoscopie urologique

Les 12 mémoires vous assurent un gain de temps au quotidien.

Les accessoires permettent toutes les positions et l'adaptation de tous les débitmètres.
Enfin, l'hygiène est irréprochable, avec une structure autoporteuse en aluminium et acier inoxydable massif, sans vis, avec des surfaces fermées et protégées, qui ne se corrodent pas.